

astraiia - instalace licence

verze dokumentu: 1.0, 2.6.2020

1 Instalace licence pro lokální (nesíťovou) verzi astraiia	2
2 Instalace pro síťovou verzi astraiia	3

1 Instalace licence pro lokální (nesít'ovou) verzi astraia

Pokud Vaše licence vypršela nebo provádíte instalaci do nainstalované demoverze, po spuštění *astraia* zvolte volbu "Registrovat aplikaci" a v následném dialogu vyberte soubor s koncovkou *.LIC který Vám byl zaslán.



Spuštění lokální/nesít'ové verze astraia bez licence


Pokud je vaše licence validní tedy síťová MAC adresa v licenci odpovídá síťové MAC adrese Vašeho počítače, bude licence vložena a při dalším spuštění nebude vyžadována.

2 Instalace pro síťovou verzi *astraia*

Upozornění: před importem licence ukončete všechny spuštěné instance *astraia* na všech počítačích v síti!


Pro síťovou verzi *astraia* existuje systémová služba "*astraia licence server*". Pro konfiguraci této služby spusťte soubor *AstraiaServices* na uživatelské ploše nebo přímo z pevného disku serveru (ve výchozí konfiguraci uloženo jako "*c:\astraia\astraiaservices.exe*").

Po spuštění se zobrazí dialog se seznamem systémových služeb *astraia*, u služby "Licence server" klikněte na tlačítko "Configure".

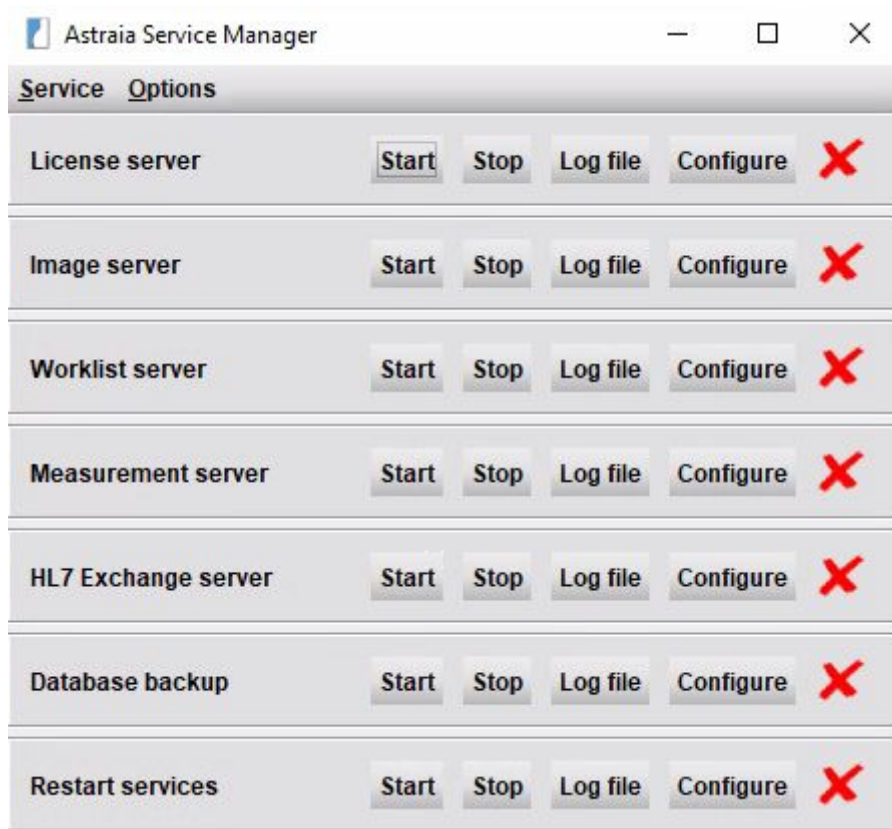

Přehled systémových služeb *astraia*

V zobrazeném dialogu kliknutím na tlačítko "Import" budete vyzváni k vybrání souboru s koncovkou *.LIC který Vám byl zaslán.

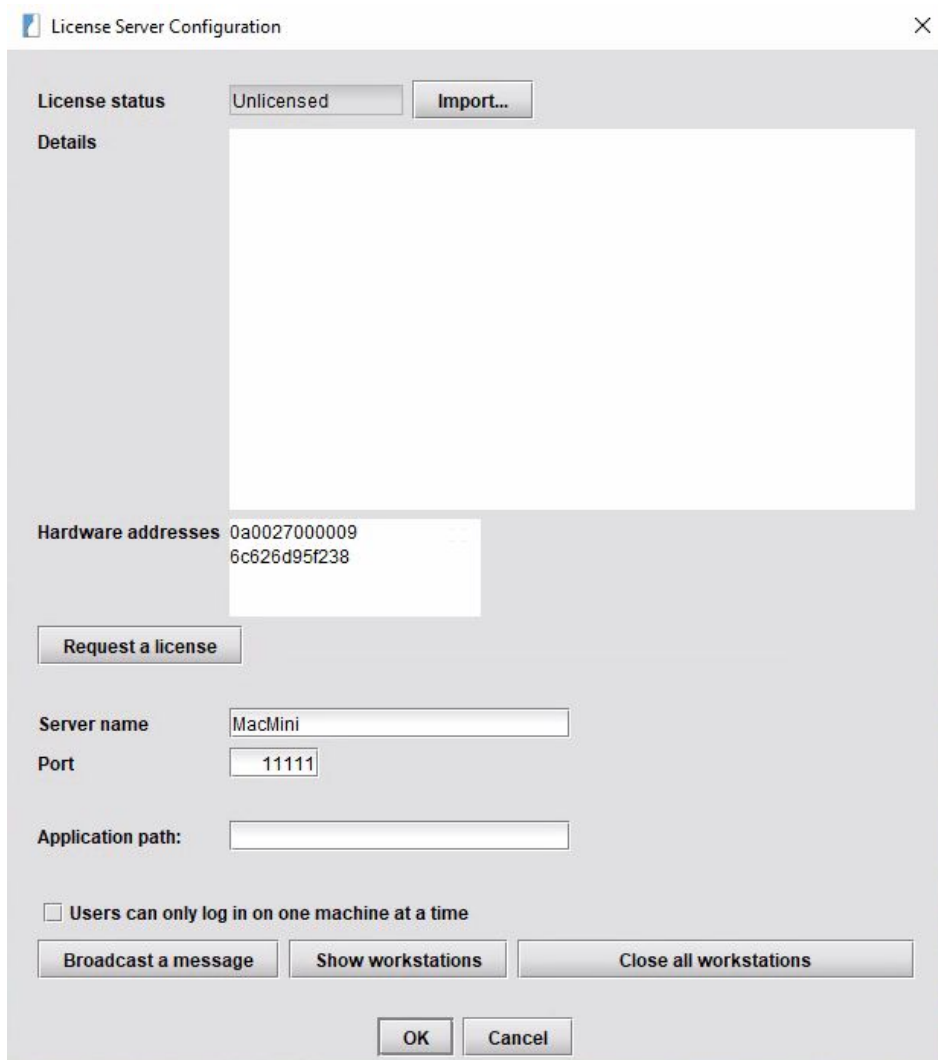

Konfigurace služby licenčního serveru

Po úspěšném importu okno konfigurace licence i seznamu systémových služeb můžete uzavřít.

V případě komplikací kliknutím na tlačítka "Stop" a "Start" službu restartujete.